CideTest 1 gt™

Bandelettes de Tests de Puissance du Glutaraldéhyde | 1.0–2.5%

Assurance de la sécurité et de l'efficacité de vos produits



- Des bandelettes de test de glutaraldéhyde sont nécessaires pour évaluer la concentration de glutaraldéhyde dans les solutions de désinfection de haut niveau et de stérilisation. Vous pouvez vérifier le pourcentage de glutaraldéhyde dans la solution à l'aide des bandelettes de test.
- L'outil de contrôle de la qualité surveille l'efficacité de la solution Gluterate de Germiphene (glutaraldéhyde à 2,0 %) lors du retraitement des équipements et des instruments médicaux.
- Les désinfectants de haut niveau et les stérilisants doivent maintenir la concentration minimum efficace (« CME ») de glutaraldéhyde à 1,5 % ou plus pendant la durée d'utilisation de 28 jours pour stériliser et désinfecter efficacement à un haut niveau.



Utilisez avec le Gluterate!

Solution de Glutaraldéhyde à 2 %


Vous devez tester la solution compte tenu de son utilisation. Par exemple, si vous utilisez la solution tous les jours, vous devez tester la solution quotidiennement et les résultats doivent être enregistrés dans votre registre de désinfection de haut niveau / stérilisation.

Utilisation Simple et Rapide

Trempez la bandelette dans la solution de test 1 seconde, ou appliquez une goutte de solution de test sur le tampon de réactif. Retirez l'excès de solution de test en secouant doucement la bandelette ou en touchant le côté de la bandelette avec un papier absorbant.

Après 30 secondes, comparez la couleur de la bandelette au guide de couleurs.

Résultats Rapides et Clairs

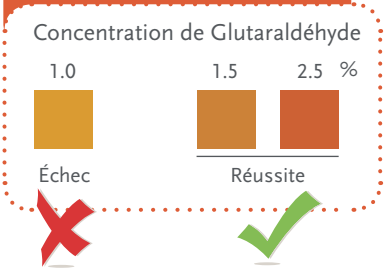

GERMIPHENE

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec votre directeur régional des ventes our appeler Germiphene au 1.800.265.9931 | www.germiphene.com

R0